

尿一般検査における基本マスタの入力法

尿定性検査における「基本マスタ管理メニュー」への入力は、「検査項目別設定」タブを選択し入力を行うことにより簡単に入力が可能です。

まずは、下の画像のように「基本マスタ管理メニュー」の右から二番目のタブ「検査項目別設定」をご選択下さい。

検索条件: 日常使用 | 項目分類: 指定しない

合計 140 件

編集	コード	検査項目名称	検査項目略称
編集	101	グルコース	GLU
編集	102	総ビリルビン	T-BIL
編集	103	直接ビリルビン	D-BIL
編集	104	ナトリウム	Na
編集	105	カリウム	K
編集	106	クロール	Cl
編集	107	カルシウム	Ca
編集	108	無機リン	IP
編集	109	鉄	Fe
編集	110	マグネシウム	Mg
編集	111	総蛋白	TP
編集	112	アルブミン	Ab
編集	113	尿酸	UA
編集	114	尿赤濁	UN
編集	115	クレアチニン	Cre
編集	116	総コレステロール	TC
編集	117	中性脂肪	TG
編集	118	HDLコレステロール	HDL-C
編集	119	LDLコレステロール	LDL-C
編集	120	C反応性蛋白	CRP
編集	121	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ	AST
編集	122	アラニンアミノトランスフェラーゼ	ALT
編集	123	アルカリホスファターゼ	ALP
編集	124	乳酸デヒドロゲナーゼ	LD
編集	125	アミラーゼ	AMY
編集	126	クレアチンキナーゼ	CK
編集	138	クレアチンキナーゼMB分画	CK-MB
編集	127	γ-グルタミルトランスフェラーゼ	GGT

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

次に下の画像で示した 600 番の「尿一般 (測定装置、実施状況等登録)」をご選択下さい。


検索条件: 日常使用 | 項目分類: 指定しない

合計 148 件

編集	コード	検査項目名称	検査項目略称
編集	413	活性化部分プロトロンボリン時間	
編集	414	フィブリンゲン量	
編集	415	Dダイマー	
編集	416	凝縮結合因子I	
編集	417	凝縮結合因子II	
編集	481	血液沈殿	
編集	501	細胞診	
編集	521	細胞診	
編集	600	尿一般 (測定装置、実施状況等登録)	
編集	601	一般沈殿	
編集	681	尿沈澱	
編集	687	便中ヒトヘモグロビン	
編集	688	便中ヒトヘモグロビン定量	
編集	711	生理-心電図検査	
編集	721	生理-超音波検査	
編集	731	生理-神経生理検査	
編集	741	生理-呼吸機能検査	
編集	819	ABO血液型検査	
編集	839	RhD血液型検査	
編集	849	不規則抗体スクリーニング	
編集	859	不規則抗体同定	
編集	881	試験管法による薬液反応の判定	
編集	891	交差適合試験	
編集	901	病理沈殿	
編集	A01	HCV RNA定性	
編集	A02	HCV RNA定量	
編集	A03	結核菌抗原 定性	
編集	A04	HBV DNA定量	

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

そして開いた下の画像で示した画面にて、入力が必要な情報の一括入力が可能となります。

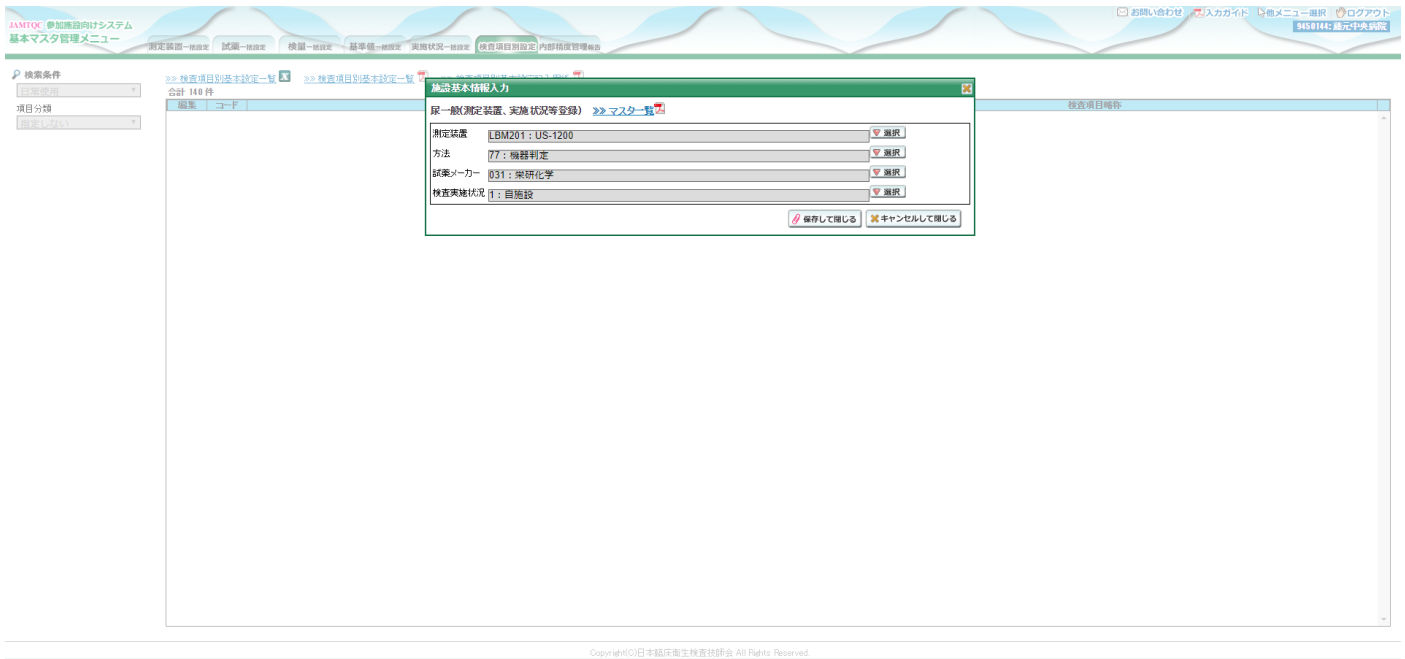

最後に入力が必要な情報についての説明です。

まず、測定装置の欄に使用している装置を、方法の欄に目視判定なのか機械での判定なのかを、試薬メーカーの欄に使用されている試験紙のメーカーをご入力下さい。

目視判定には三種類ございますが、それぞれ

- 1) 近似選択法：試験紙の色に近い色調表の色を選択する方法
- 2) 切り捨て法：試験紙の色が色調表の色に達しない場合には、濃度の低い色枠として判定する方法
- 3) 切り上げ法：試験紙の色が色調表の色枠より少しでも濃い場合には、濃度の高い色枠として判定する方法

となっております。目視での判定の場合は、該当項目をご選択下さい。

機械での判定の場合は機械判定をご選択下さい。

検査実施状況の欄は、日常検査を自施設で行っているか、外注なのかなどをご入力下さい。

また、基準値の設定は生化学の測定装置などの尿定量検査の基準値ですので、宮崎県医師会精度管理調査で行っている尿定性検査では入力の必要はございません。同様に使用する試薬（尿検査では厳密には試験紙）、検量情報などの入力も必要ございません。

以上が尿一般検査における基本マスタの入力となります。
もし疑問や質問などがございましたら、下記までご連絡下さい。
今後とも宮崎県医師会精度管理調査を何卒よろしくお願い申し上げます。

(公財) 宮崎県健康づくり協会 坂下 香代子

E-mail : sakashita@miyakenkou.or.jp TEL: 0985-38-5512 FAX: 0985-38-5014